


## Uroflujómetro Portátil modelo PICO FLOW 2 (cable o Wireless)

El PICO FLOW 2 es un instrumento de dos canales para la realización de Uroflujometría y pruebas de Electromiografía del suelo pélvico (opcional). Gracias a sus características técnicas de avanzada el PICO FLOW 2 está especialmente diseñado para exámenes urodinámicos pediátricos y ginecológicos así como siempre que sea necesario llevar a cabo un estudio urodinámico no invasivo.

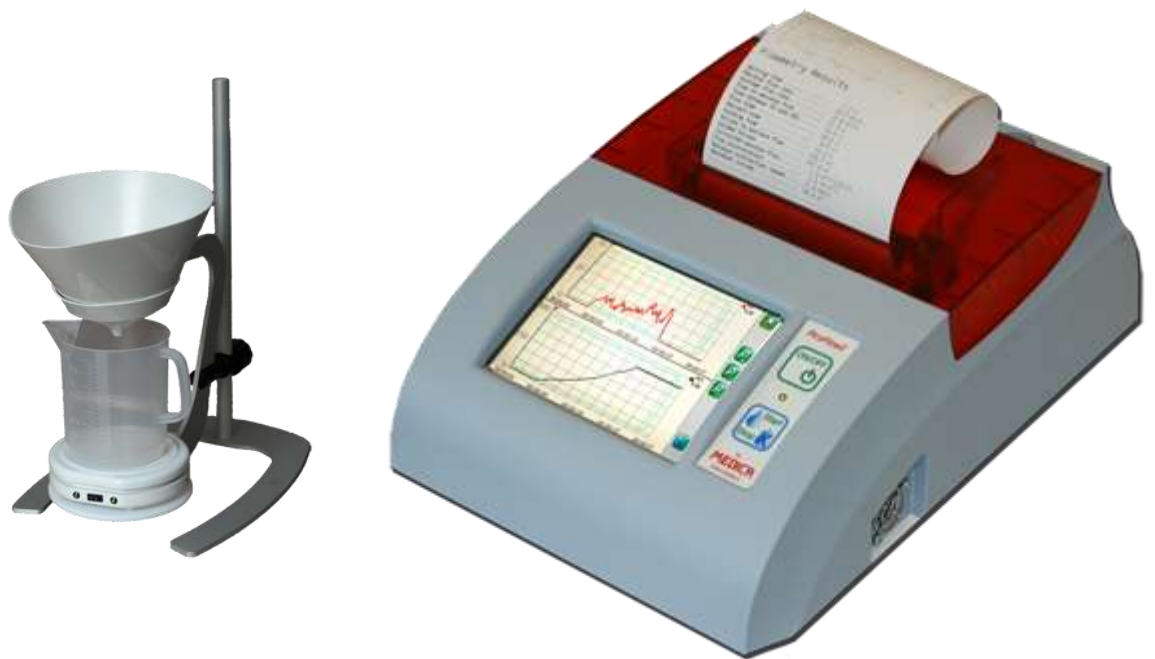

### Especificaciones Técnicas:

- Pantalla gráfica color, táctil, 5.7'', resolución 800 x 600 pixels.
- Botones Inicio y Finalización para Modo Manual
- Puerto USB para conexión a PC
- Impresora térmica integrada. Rollo de papel, ancho 114 mm

TECNOMED 2000, S.L.  
C/ Palos de la Frontera, 4 – 28012 – Madrid  
Tel: 91.530.0117 Fax: 91.539.0624 E-mail: [admin.2000@tecnomed2000.com](mailto:admin.2000@tecnomed2000.com)  
[www.tecnomed2000.com](http://www.tecnomed2000.com)

- Memoria interna de 2GB para hasta 1000 pruebas
- Alimentador externo: 230 V 50 Hz / 120V 60 Hz
- Consumo energético: 30 VA
- Dimensiones: 116 x 325 x 237 mm
- Peso: 2.0 Kg

#### FLUJOMETRO:

- Wireless (FLW4/BT) ó con Cable (FLW4/SAU)
- Transductor de caudal de célula de carga a alta Resolución y precisión a largo plazo
- Rango de Flujo: 0 a 100 ml/seg.
- Precisión 1%
- Fin de la escala: automática o manual
- Tasa de muestreo: 10 Hz
- Conversor A/D: 12 bit
- Rango de Volumen: 2000 ml
- Incluye: soporte desmontable, vaso de precipitados Graduado y embudo



- Batería de de litio / alimentación externa con circuito de recarga (para uroflujómetro sin cables – wireless -).

#### CANAL EMG (SAU-EMG/LS) (opcional):

- Rango: 0 a 2 mV
- Fin de la Escala: automática o manual
- Tasa de muestreo: 100 Hz
- Conversor A/D: 12 bit
- Cable 5 metros de largo
- Funcionamiento con electrodos de superficie

#### CARACTERISTICAS:

- Gran pantalla gráfica color táctil para entrada de Datos de paciente y configuración de la prueba
- Los trazos aparecen on-line en pantalla con la



TECNOMED 2000, S.L.  
 C/ Palos de la Frontera, 4 – 28012 – Madrid  
 Tel: 91.530.0117 Fax: 91.539.0624 E-mail: [admin.2000@tecnomed2000.com](mailto:admin.2000@tecnomed2000.com)  
[www.tecnomed2000.com](http://www.tecnomed2000.com)



posibilidad de cambiar su escala

- Dos canales: 1 uroflujometría, 1 (opcional) EMG
- Inicio/Finalización de la prueba: Manual o Auto
- Impresora Térmica incorporada
- Posibilidad de post análisis de los resultados tanto en modo automático como manual mediante la inserción de marcadores dedicados.
- Paquete de software para PC basado en Windows (compatible Windows 7, Windows 8.1 y Windows 10) para almacenamiento y revisión de pruebas en el PC (OPCIONAL)

**CONFIGURACION ESTANDAR:** Unidad Pico Flow 2 (MU16); Flujómetro con polo desmontable, vaso de precipitados de 2 litros, embudo y cable (para versión con cable).

**OPCIONALES:** Canal de EMG con electrodos de superficie, cable 5 metros largo. Electrodo de superficie desechables. Silla con orinal. Maletín de transporte. Software FLOWSOFT 2.

TECNOMED 2000, S.L.  
C/ Palos de la Frontera, 4 – 28012 – Madrid  
Tel: 91.530.0117 Fax: 91.539.0624 E-mail: [admin.2000@tecnomed2000.com](mailto:admin.2000@tecnomed2000.com)  
[www.tecnomed2000.com](http://www.tecnomed2000.com)

