

Colección PRESTAN

Pack de un (1) Maniquí profesional de formación de RCP Adulto (tono piel intermedio) con monitor luminoso de frecuencia RCP, un (1) Maniquí profesional de formación de RCP Pediátrico (tono piel intermedio) con monitor luminoso de frecuencia RCP y un (1) Maniquí profesional de formación de RCP Neonato (tono piel intermedio) con monitor luminoso de frecuencia RCP

Referencia: PR-FM300M-MS(BM):

FICHA TECNICA



Los torsos y maniqués profesionales de RCP de Prestan® están especialmente diseñados para la formación y entrenamiento de la técnica de resucitación cardiopulmonar.

Tanto las **superficies del pecho como de la cara son desmontables** y pueden ser reemplazadas.

Poseen **Avisos visuales**: Incluyen **monitor luminoso de frecuencia de las compresiones torácicas** a fin de indicar tanto al profesor como al alumno si las mismas se están realizando con el ritmo adecuado.




Monitor luminoso en torso adulto y pediátrico



Monitor luminoso en maniquí neonatal

El monitor luminoso para la frecuencia de las compresiones torácicas de los maniqués y torsos de RCP de la firma Prestan® cumple con las últimas Recomendaciones de Resucitación CPR & ECC e indica al alumno cuando llega al rango adecuado de compresiones, así como cuando excede en la velocidad de las compresiones.

El rango de frecuencia recomendado para las compresiones es de 100 a 120. Así, cuando el alumno esté realizando las compresiones dentro de este rango, dos luces verdes se iluminarán. Cuando se llega a 120, el monitor ilumina una luz amarilla, indicando al profesor y al alumno que las compresiones están siendo demasiado rápidas. La luz amarilla sólo se apaga cuando se reduce la frecuencia de las compresiones.

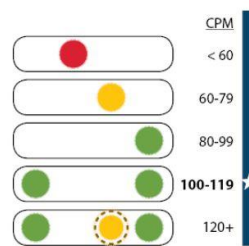

Poseen **Avisos sonoros**: Al efectuar las compresiones torácicas se genera un ruido "click" siempre y cuando la profundidad de la compresión es de 5 cm (la compresión puede continuar hasta 6 cm de profundidad).

Permiten la maniobra frente-mentón para apertura de vías aéreas y respiración boca o boca.

Rasgos anatómicos reales tales como clavícula, línea de pezones, esternón, xifoides y ombligo (éste último permite el entrenamiento real de los ejes abdominales).

Posee una porción de cuello especialmente desarrollada y accesible que incorpora un área para la simulación de la comprobación del pulso carotídeo.

Diseñados para la utilización con electrodos de desfibrilación de entrenamiento.

Tono de piel color intermedio.

Fabricados en goma Sin Látex.

Fabricación USA

Garantía 3 años

El pack de tres maniqués COLECCIÓN PRESTAN incluye:

Diez (10) protectores respiratorios (pulmón) adulto, diez (10) protectores respiratorios (pulmón) pediátricos, diez (10) protectores respiratorios (pulmón) neonatales, bolsa de transporte de nylon con superficie de trabajo e instrucciones de uso de cada uno de los maniqués.