

# Grúas de traslado

Sunlift y Oxford






Sunlift / Oxford



### La gama más completa del mercado


Te presentamos la gama de grúas para elevación y traslado de pacientes de Sunrise Medical. Modelos de las gamas SUNLIFT y OXFORD con un innovador diseño, que potencian la seguridad y comodidad tanto del usuario como de su cuidador. Para uso doméstico, en residencias u hospitales. Todas ellas con una estética muy cuidada. La gama de grúas de Sunrise Medical se complementa con una amplia posibilidad de arneses que se ajustan a la capacidad funcional de la persona y al tipo de grúa.

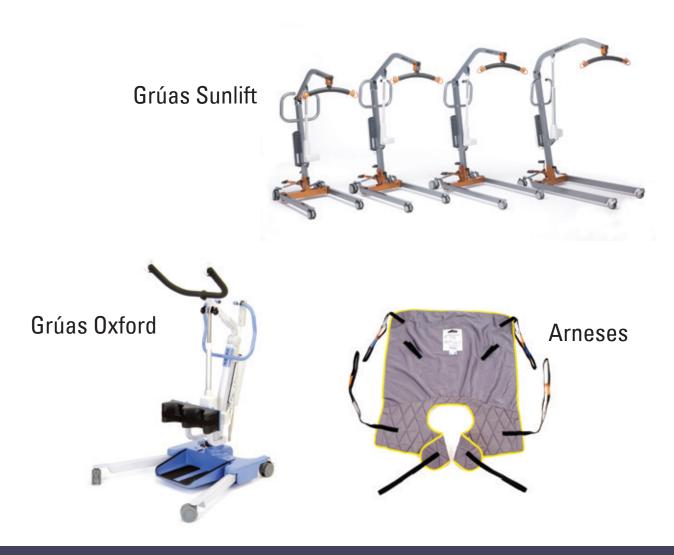

Con los modelos de grúas de Sunrise Medical, sus usuarios elevarán, sobre todo, su calidad de vida.



### Toma de medidas

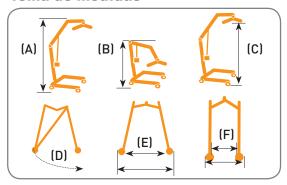





	SUNLIFT Micro	SUNLIFT Mini
Peso máximo paciente	130 kg	130 kg
Longitud total máxima (con ruedas hacia fuera)	1.110 mm	1.130 mm
Longitud total mínima (con ruedas hacia dentro)	970 mm	1.065 mm
Anchura máx. con patas cerradas	545 mm	540 mm
Altura total máxima (sin carga) (A)	1.725 mm	1.870 mm
Altura total mínima (sin carga) (B)	1.130 mm	1.280 mm
Altura máxima de la percha (sin carga) (C)	1.483 mm	1.628 mm
Altura mínima de la percha (sin carga)	460 mm	513 mm
Radio de giro con patas abiertas (D)	1.130 mm	1.240 mm
Patas abiertas: (E) Anchura máxima (externa) Anchura máxima (interna)	870 mm 740 mm	940 mm 810 mm
Patas cerradas: (F) Anchura máxima (externa) Anchura máxima (interna)	545 mm 465 mm	540 mm 470 mm
Altura al borde superior de las patas	100 mm	100 mm
Altura mínima libre sobre el suelo	20 mm	20 mm
Ruedas delanteras	75 mm	75 mm
Ruedas traseras	100 mm	100 mm
Peso conjunto mástil, brazo y componentes electrónicos	16,6 kg	17,54 kg
Peso conjunto de la base	13,34 kg	13,6 kg
Peso de las baterías	2,76 kg	2,76 kg

## Gama SUNLIFT





#### Especificaciones técnicas

(comunes en los 4 modelos)

**Baterías:** 2 x 12v de gel ácido **Capacidad baterías:** 2,9 Amph **Corriente entrada cargador:** 230 v / 50 Hz 0.12 A

Corriente entrada cargador: 230 v / 50 Hz 0.12 A Corriente salida cargador: 28 v 0.5 Amph

SUNLIFT Midi	SUNLIFT Major
150 kg	175 kg
1.225 mm	1.340 mm
1.160 mm	1.275 mm
640 mm	650 mm
1.940 mm	2.006 mm
1.285 mm	1.435 mm
1.688 mm	1.813 mm
555 mm	575 mm
1.380 mm	1.500 mm
1.075 mm 980 mm	1.185 mm 1.105 mm
640 mm 540 mm	650 mm 520 mm
100 mm	110 mm
20 mm	15 mm
75 mm	75 mm
100 mm	100 mm
17,6 kg	22,75 kg
15,1 kg	18,1 kg
2,76 kg	2,76 kg

#### **Características comunes**



Las patas se abren y cierran presionando el pedal ergonómico con el pie para conseguir una mayor o menor anchura de la grúa.



Mando con grado de protección IPX4 contra la humedad y salpicaduras y con un diseño ergonómico.



**Amplia asa ergonómica** que permite posicionar los codos a 90º para un manejo más cómodo de la grúa sin forzar la muñeca.